

# NECESITA UNA MÁSCARA - INSTRUCCIONES DE COSER

## 10 Pasos Sencillos

Para obtener más información y una demostración en video, visite: [www.needamask.life](http://www.needamask.life)

**PASO 1** Corte tres juegos de la plantilla (dos de algodón claro, dos de algodón oscuro y dos de polipropileno) y corte 25" de elástico.



**PASO 2** Coser cada par juntos (lados derechos juntos para tela de algodón).




**PASO 3** Gire los lados derechos de la tela de algodón hacia afuera y la puntada superior a lo largo del borde. Sujete el polipropileno cerca del borde.



**PASO 4** Abra las piezas de la máscara de algodón y combine de adelante hacia adelante. Agregue el polipropileno a cada lado posterior. Coser en la parte superior e inferior de la máscara.



**PASO 5** Coloque un limpiador de pipas de 4 pulgadas a la mitad y colóquelo en la sección de la nariz del polipropileno. Zigzag a través para mantener en su lugar.

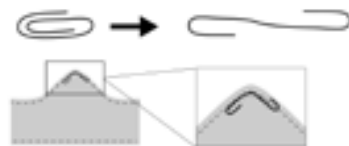

**PASO 6** Voltee los lados derechos (manteniendo la tela de polipropileno adentro) y la puntada superior, superior e inferior de la máscara. (Deje los lados abiertos)



PASO 7 Enrolle los lados hacia adentro 1/4" y la puntada superior alrededor de la máscara



PASO 8 Doblar los lados de la máscara 1" y la puntada superior hacia abajo para crear una carcasa para elástico.



PASO 9 Pase el elástico a través de la carcasa en un círculo con los extremos colgando en la parte inferior de la máscara.



PASO 10 Ate la parte inferior del elástico en un nudo ajustable.

